

# Fjernbetjening

Brugermanual



### Introduktion

Fjernbetjeningen muliggør let og diskret betjening af dine høreapparater.

Takket være det langtidsholdbare batteri er den altid klar til brug.



1. Valg af side
2. Øg lydstyrken
3. Skru ned for lydstyrken
4. Slå lyden fra

5. Valg af program
6. Særlig funktion
7. Hjem (Normalprogram)
8. Nøggleås

### Tilslut fjernbetjeningen til høreapparater

Hvis du vil bruge fjernbetjeningen med dine høreapparater, skal du parre de to enheder. Denne proces er kun nødvendig én gang, da begge enheder automatisk genkender hinanden efterfølgende, når de er tændt og inden for rækkevidde.


Du kan slutte fjernbetjeningen til et eller to høreapparater.

Installation:

1. Skub nøglelåsen fra højre (låst) position til venstre (ulåst).



2. Sæt et nyt batteri i dine høreapparater og luk batteriskuffen. Placer dine høreapparater indenfor 30 cm fra fjernbetjeningen.

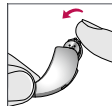

- *Bemærk: Hvis du bruger et CROS-system, skal du slukke for dit høreapparat og CROS-systemet. Tænd derefter kun for høreapparatet, CROS-systemet forbliver slukket under opkobling.*

3. Tryk på HOME knappen i 5 sekunder.



4. Efter 5 sekunder begynder begge LED-lamper at blinke hurtigt.



5. Tilslutning af et sæt høreapparater:

Tilslutningen er vellykket for begge høreapparater, hvis den venstre LED lyser konstant blåt efter 2+ sekunder og den højre LED lyser konstant rødt efter 2+ sekunder. Hvis ikke, gentag trin 2 til 5.

#### Tilslutning af **venstre høreapparat:**

- Den venstre LED lyser konstant blåt efter 2+ sekunder. Tilslutningen er vellykket for det venstre høreapparat. Hvis ikke, gentag trin 2 til 5.

#### Tilslutning af **højre høreapparat:**

- Den højre LED lyser konstant rødt efter 2+ sekunder. Tilslutningen er vellykket for det højre høreapparat. Hvis ikke, gentag trin 2 til 5.

6. Tryk på lydstyrketasten for at kontrollere den aktive forbindelse. Der skal høres en ændring i dit høreapparat.



## Valg af side



Med knappen til sidevalg kan du foretage specifikke indstillinger på kun ét høreapparat eller begge høreapparater.

### Høreapparatsjustering på begge sider:

For at justere begge høreapparater samtidigt, skal knappen placeres i midten.

### Ensidig justering af høreapparater:

For at foretage en justering på kun ét høreapparat skal kontakten placeres til højre eller venstre. Hvis du kun bærer ét høreapparat, sender fjernbetjeningen automatisk signalet til det korrekte høreapparat, uanset kontaktens position

## LED



Når en kommando sendes til venstre høreapparat, blinker LED'en blå. Den blinker rødt, når kommandoen sendes til det højre høreapparat.

## Skift lydstyrke



Når du trykker på piltasten ned, skruer du ned for lydstyrken af dine høreapparater.

Når du trykker på piltasten op, skruer du op for lydstyrken af dine høreapparater.

## Home



Tryk på HOME knappen for at stille dit høreapparat til den oprindelige indstilling.

## Tastelås

For at kunne foretage ændringer via fjernbetjeningen, skal tastelåsen låses op. Lås tasterne for at forhindre uønskede ændringer.



## Slå lyden fra



Du kan bruge mute-knappen til midlertidigt at deaktivere transmissionen af alle lyde i dine høreapparater. Tryk på mute-knappen igen for at genaktivere transmissionen.

---

**BEMÆRK:** Er lyden på høreapparaterne slået fra, vil et tryk på en vilkårlig knap genaktivere høreapparaterne.

## Valg af program



Dine høreapparater kan udstyres med flere programmer. Du vælger et program ved at trykke på knappen til programmet. Hvert tryk skifter til det næste program.

## Særlig funktion (Favorit)



Følgende særlige funktioner kan gemmes:

- Ingen** - Der sker ingen ændringer når du trykker på knappen.
- Comfort Boost**- Når du trykker på knappen vil forstyrrende omgivelseslyde blive reduceret. Ved at trykke på knappen igen, slukkes denne funktion igen.
- Gå til høreprogram 4**- Program 4 aktiveres med det samme, når der trykkes på knappen. Andre høreprogrammer springes over.
- Tinnitus lyd til / fra** - Når der trykkes på knappen, startes eller stoppes den gemte lyd for at lindre tinnitus.

---

**BEMÆRK:** Nogle funktioner afhænger af høreapparatsmodellen.

## Ekstra tilbehør

1. Før løkken på ledningen på undersiden af fjernbetjeningen som vist.
2. Træk enden lidt ud og træk snoren gennem løkken. Træk dem stramt.

**BEMÆRK:** Dette produkt er et muligt tilvalg  
Spørg din audiolog for mere info



## Tips til fejlfinding

FEJL:	MULIGE ÅRSAGER:	MULIG LØSNING:
LED lyser ikke, når der trykkes på en knap.	Fjernbetjeningen er låst.	Lås fjernbetjeningen op ved at skubbe tastelåsen fra højre til venstre
LED's lyser, men høreapparaterne reagerer ikke.	Efter at tastelåsen er låst op, kan det tage et øjeblik, før enhederne "finder" hinanden igen.	Vent ca. 1 sekund, efter at du har frigivet tastelåsen, og tryk derefter på en funktionstast.
	Høreapparaterne er ikke forbundet med fjernbetjeningen.	Udfør tilslutningsprocessen beskrevet på side 4.
	Høreapparaternes batteristatus understøtter ikke længere kommandoen	Sæt nye batterier i dine høreapparater.
Høreapparaterne kan ikke tilsluttes	Kun ét høreapparat blev fundet under tilslutningen.	Sørg for, at begge høreapparater er aktive og inden for rækkevidde under tilslutning.
Kun ét høreapparat modtager omstillingskommandoen	Sidevalget står på højre eller venstre position	Indstil sidevælgerknappen til midterpositionen

## Forordninger

### Vigtige informationer



Bortskaffelse af elektroniske enheder følger de lokale regler

### Bemærk i henhold til lov om elektrisk og elektronisk udstyr

Sørg for at aflevere en ubrugelig fjernbetjening til din hørespecialist eller et andet autoriseret bortskaffelsessted for gamle elektriske apparater. Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og må derfor aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Inkluder denne betjeningsvejledning med bortskaffelse, da den indeholder oplysninger til bortskaffelsespersonale.

### Information til bortskaffesspecialister:

Dette produkt indeholder et lithium-ion-polymerbatteri.

#### Fjernelse af batteriet:

- Løft husets halvdele fra hinanden med en lille skruetrækker.
- Træk batteristikket ud af printkortet for at undgå utilsigtet kortslutning.
- Brug et fladt, bredt blad til at lirke batteriet væk fra huset.

### Formål med brug

Fjernbetjeningen er et tilbehør til trådløse transmitterende høreapparater. Det er beregnet til at betjene lydstyrke og høreprogrammer.

Fjernbetjeningen er klassificeret som type B, anvendt del af IEC 60601-1; Standard for medicinsk udstyr.

Fjernbetjeningen er udviklet under hensyntagen til standarderne for internationale elektromagnetiske kompatibilitetskriterier. På trods af dette er der mulighed for interferens forårsaget af metaldetektorer, elektromagnetiske felter, medicinsk udstyr, radiobølger og elektrostatisk udladning.

Fjernbetjeningen kan rengøres med en fugtig klud. Undgå at bruge opløsningsmidler.

Hvis du har implanteret medicinsk udstyr som f.eks. En hjertestarter eller en pacemaker, skal du kontakte din speciallæge eller producenten af det medicinske udstyr for at afklare mulige risici på forhånd. Hvis du skal gennemgå en MRI- eller MR -behandling, anbefales det kraftigt ikke at bruge fjernbetjeningen og lægge den til side.

Fjernbetjeningen er ikke certificeret til brug i potentielt eksplosive miljøer.

### Brug i fly

Fjernbetjeningen må kun bruges med udtrykkelig tilladelse fra flybesætningen.

### International brug

Fjernbetjeningen og dens trådløse transmission er licenseret landespecifik og opererer på en radiofrekvens, der i andre lande muligvis ikke er godkendt til denne type brug.

Dette kan føre til interferens med andre elektroniske enheder eller interferens med høreapparaterne, når du rejser internationalt.

Fjernbetjeningens batteri kan ikke udskiftes. Forsøg ikke at skifte batteri.

Fjernbetjeningen er udviklet til følgende temperaturforhold:

- Driftstemperatur: -20 til + 60 grader Celsius, fugtighed <95%, uden kondens
- Opbevaring: -40 til +60 grader Celsius

**Vi er forpligtet til at gøre dig opmærksom på følgende:**

**VIGTIGE BEMÆRKNINGER:** Brug af fjernbetjeningen ved siden af andre elektroniske enheder bør undgås, da dette kan føre til reduceret ydelse. Hvis en sådan brug er nødvendig, skal du kontrollere, at dine høreapparater og / eller elektroniske enheder fungerer normalt.

**VIGTIGE BEMÆRKNINGER:** Brug af tilbehør, komponenter eller reservedele, der ikke er specificeret og godkendt af producenten til denne enhed, kan føre til øget elektromagnetisk emission og nedsat elektromagnetisk immunitet. En reduceret ydelse kan være resultatet.

**VIGTIGE BEMÆRKNINGER:** Hvis der bruges mobile radiotransmissionsenheder i en afstand på op til 30 cm fra fjernbetjeningen, kan dette føre til tab af ydeevne. Hvis dette er tilfældet, skal du øge afstanden mellem de to enheder.

### **Teknisk beskrivelse af trådløs transmission**

Fjernbetjeningen fungerer inden for frekvensbåndet 2,4 - 2,4835 GHz med en maksimal strålingsenergi på 3dBm og transmissionsmodulation af typen 1M06F1W med en båndbredde på 2 MHz.

Fjernbetjeningen er testet og opfylder følgende emissioner og immunitetstest:

- IEC 60601-1-2 udstrålede immunitetskrav for en gruppe 1 klasse B-enhed som specificeret i CISPR 11.
- RF udstrålede immunitet ved et feltniveau på 10 V / m mellem 80 MHz og 2,7 GHz og højere feltniveauer, som specificeret i tabel 9 i IEC 60601-1-2.
- Immunitet over for magnetfelter ved et feltniveau på 30 A / m.
- Immunitet over for ESD-værdier på +/- 8 kV udført udledning og +/- 15 kV luftudladning.

Fjernbetjeningen er klassificeret med en IP5X i henhold til IEC60529 og er beskyttet mod støv.

Fjernbetjeningen indeholder ikke udskiftelige komponenter.

Fjernbetjeningen må ikke åbnes eller ændres.

Tilslut ikke fjernbetjeningen til andre eksterne enheder end dem, der er beskrevet i afsnittet om brug.



## FCC/IC Information

FCC ID: EOA-24WR

IC: 6903A-24WR (Modell 600)

### FCC Note

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne og med RSS-210. Følgende betingelser gælder for drift:

- (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens; og
- (2) Enheden skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

### BEMÆRK:

Producenten er ikke ansvarlig for radio- eller billedinterferens forårsaget af uautoriserede ændringer foretaget på denne enhed. Sådanne ændringer kan tilbagekalde brugerens tilladelse til at bruge enheden. Starkey Hearing Control erklærer hermed, at Fjernbetjeningen fra Starkey Hearing Technologies opfylder de væsentlige krav og andre relevante regler i direktiv 2014/53 / EU. En kopi af erklæringen om overensstemmelse fås på følgende adresse:

[docs.starkeyhearingtechnologies.com](https://docs.starkeyhearingtechnologies.com)

### Starkey Hearing Technologies

6700 Washington Ave. South

Eden Prairie, MN 55344 USA



EC REP

Starkey Laboratories (Germany) G.m.b.H

Weg beim Jäger 218-222

22335 Hamburg

Germany

CE   
2797

Følgende symboler bruges i denne betjeningsvejledning og på fjernbetjeningen.

Enheden producerer og modtager radiosignaler. Interferens kan forekomme, hvis enheder med dette symbol er i nærheden.



Korrekt bortskaffelse.



